



接種環滅菌器

Bunsen burner





最完美的滅菌器

It's magic - Sterilize with light!



73

1 即用型，無需預熱，無需等待 → 瞬間達到 900 – 1.300 °C。

2 無氣體，無明火 → 不傷眼睛，不損壞 HEPA 過濾器 and 機櫃氣流不受影響。


3 感應式啟動，可設滅菌時間 → 單手操作，節約能源，愛地球。

4 運行期間發熱量低 → 用手觸摸也不危險。

規格：▪ 尺寸（寬 x 高 x 深）：152 x 210 x 195 mm
▪ 重量約：2.500 g

貨號：230 V _ 3.399 002 ; 115 V _ 3.399 012
帶底石英管 _ 3.399 502

溫度：900 °C ~ 1.300 °C

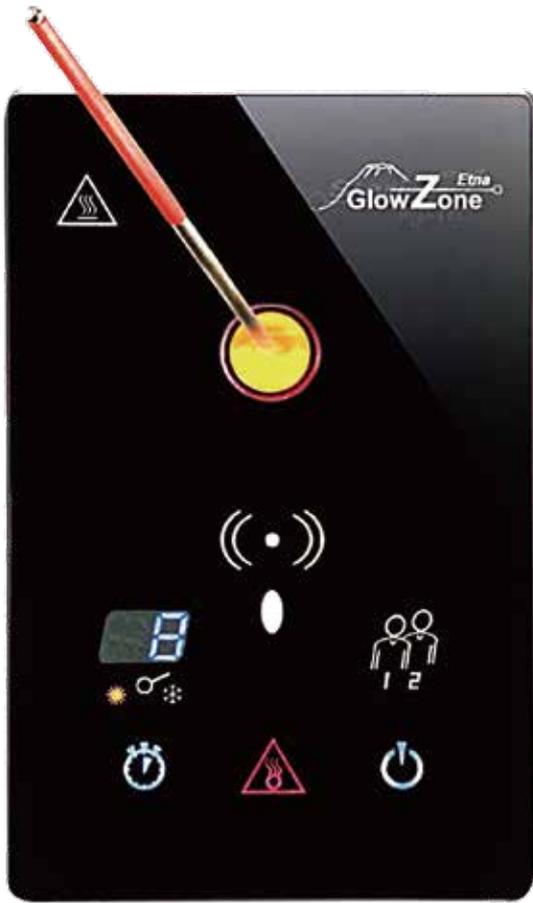

GLOWZONE ETNA 紅外線智慧型接種環滅菌器 / LF5.101.000



耐熱石英管
在幾秒鐘內可移除



無接觸式紅外傳感器
自動啟動滅菌過程



餘熱警示標示



觸控操作
開 / 關用戶選擇



觸控計時器
冷卻循環提醒



觸控計時器
滅菌時間



觸控操作
不鏽鋼



固定架



觸控操作



耐熱石英玻璃

- 利用 IR 鹵素聚光燈產生高熱來達成滅菌效果，適合無法使用本生燈或酒精燈滅菌的實驗室使用
- 不需預熱，紅外線感應，插入接種環自動開始加熱，5-10 秒快速升溫滅菌，0-25 秒自動降溫冷卻
- 節省電能消耗與加熱管損耗
- 由耐磨耐熱石英玻璃製成內管，光滑耐磨、不堵塞、不易髒污、殘渣不易附著，容易於清理
- 不鏽鋼材質機殼，耐熱玻璃觸控面板耐化學性佳，不易髒污
- 可設定自動關機時間




微型滅菌器 SIRIUS Microincinerator

- 可以製作循環滅菌、玻片固定和培養管口
- 可以在生物安全櫃中使用微型焚化爐，不會損壞 HEPA 過濾器
和機櫃氣流不受影響
- 該過程是在石英管中進行的微型焚化爐氣溶膠的形成被完全抑制
- 外表面溫度僅為 30C，您可以戴手套工作



紅外線火焰式滅菌器 LabFlame / LF8.000.000

- 符合生物安全櫃使用
- 快速精確的點火，並均勻且持續的火焰
- 腳踏開關或免觸摸紅外傳感器點火
- 快速的循環退火
- 不銹鋼機身
- 自動關機

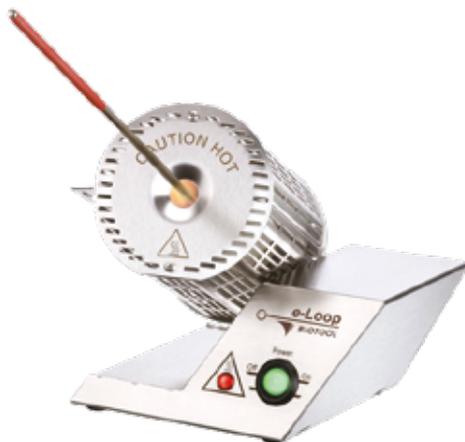

e-Loop Microincinerator 接種環滅菌器 / LF5.101.000

- 不銹鋼設計
- 長效滅菌管 (石英玻璃)
- 滅菌時間為 5-7 秒
- 自動上鎖角度調整，7 個角度調整有助於人體工學的操作
- 殘餘熱量顯示信號表示滅菌管的熱表面，以保護使用者免受灼傷